

LA TERAPIA IN POCHI E SEMPLICI PASSI

01



Collegare il cavo di alimentazione

02



Collegare 1 o 2 diffusori a seconda del trattamento scelto

03



Accendere il dispositivo con l'interruttore posto sul retro

04



Scegliere il trattamento con i tasti UP & DWN

05




Confermare il trattamento con il tasto ENTER

06



Avviare il trattamento con il tasto START/STOP

TRATTAMENTI INDICATI

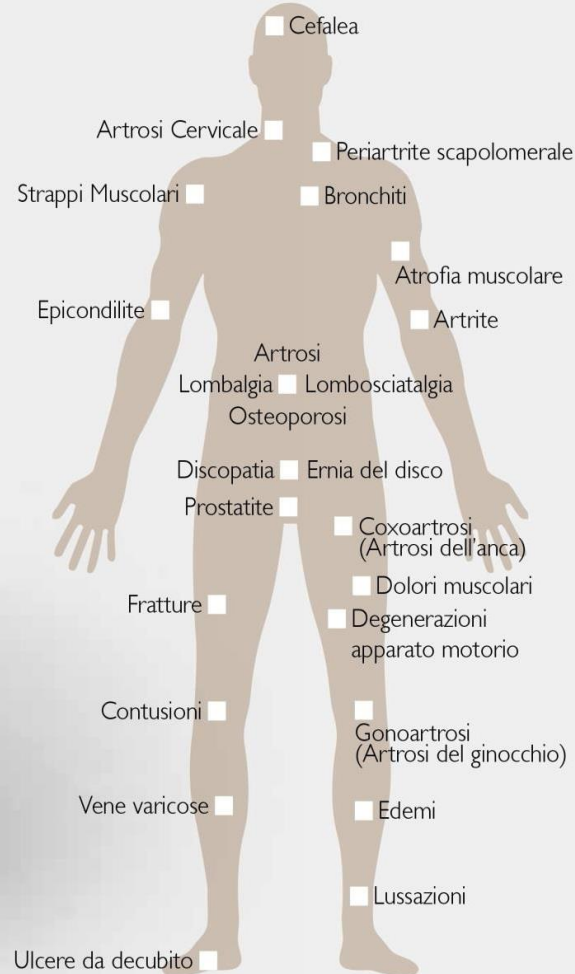

BioMagnetic

M a g n e t o t e r a p i a

BioMagnetic – L'energia del Benessere

La magnetoterapia è una forma di cura che utilizza l'energia magnetica ed è efficace, sicura e non invasiva. Rigenera le cellule lese, ricaricandole e promuovendo un'accelerazione di tutti i fenomeni riparatori, sia a livello osseo che muscolare, con una netta azione antinfiammatoria, antalgica e senza effetti collaterali.

I benefici della Magnetoterapia

- Agisce come un antidolorifico
- E' un potente antinfiammatorio
- Stimola la riduzione degli edemi
- Favorisce il processo di calcificazione
- Migliora la circolazione sanguigna
- Rigenera le cellule prive di energia

E' perciò utile per la cura di molti disturbi tra cui:

artrite, dolori muscolari, tendiniti, lombalgie, fratture, obesità, ansia, cefalee, ipertensione, ecc

BioMagnetic è un apparecchio facile da usare, pensato per un uso domestico e può essere utilizzato da chiunque. Dispone di 2 canali indipendenti, per cui può essere usato contemporaneamente a 2 persone, oppure può fare 2 trattamenti simultaneamente alla stessa persona. E' come avere 2 apparecchi in casa!

I numerosi programmi di cura sono pre-impostati e facilmente utilizzabili grazie al comodo display. In funzione del programma scelto **BioMagnetic** determinerà automaticamente i tempi del trattamento e l'intensità della frequenza magnetica.

BioMagnetic

M a g n e t o t e r a p i a

Ha garanzia per un periodo di 6 anni dalla data di acquisto.



NUMERO VERDE
800.661803

38121 Trento
Via di Lamar, 2
Tel. 0461.421380
Fax 0461.426768
CF e P.IVA 01969690229
www.hypnos.it
info@hypnos.it



44 Protocolli preimpostati

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 PROGRAMMA LIBERO | 15 DOLORI ARTICOLARI | 29 METATARSALGIE | 43 TENOSINOVITI |
| 2 TERAPIA NOTTURNA | 16 DOLORI MUSCOLARI | 30 NEVRALGIA ARTICOLARI | 44 TORCICOLLO |
| 3 ARTRITI | 17 DOLORI VERTEBRALI | 31 OMARTRITE | + 5 memorie |
| 4 ARTROSI | 18 ENTESITI | 32 OMARTROSI | <u>impostabili</u> |
| 5 ARTROSI CERVICALE | 19 EPICONDILITI | 33 OSTEOPOROSI | |
| 6 ARTRORI VERTEBRALE | 20 EPITROCLEITI | 34 PERIARTRITE SCAPOLOMERALE | |
| 7 BORSITI | 21 FASCITE PLANTARE | 35 POLIARTRITI | |
| 8 CERVICALGIE | 22 FRATTURE | 36 PSEUDAORTROSI | |
| 9 CONDRITI | 23 GONOARTROSI | 37 RIZOARTROSI | |
| 10 CONDRPATIA ROTULEA | 24 INFIAMMAZIONI ARTICOLARI | 38 SCIATALGIA | |
| 11 CONTRATTURE MUSCOLARI | 25 LOMBALGIE | 39 STRAPPI MUSCOLARI | |
| 12 COXOARTROSI | 26 LOMBOSCIATALGIE | 40 TALALGIA | |
| 13 DISCOPATIE | 27 LUSSAZIONI | 41 TENDINITI | |
| 14 DISTORSIONI | 28 MALATTIE REUMATICHE | 42 TENDINOPATIE | |

BioMagnetic
M a g n e t o t e r a p i a




BioMagnetic

M a g n e t o t e r a p i a



BioMagnetic

M a g n e t o t e r a p i a

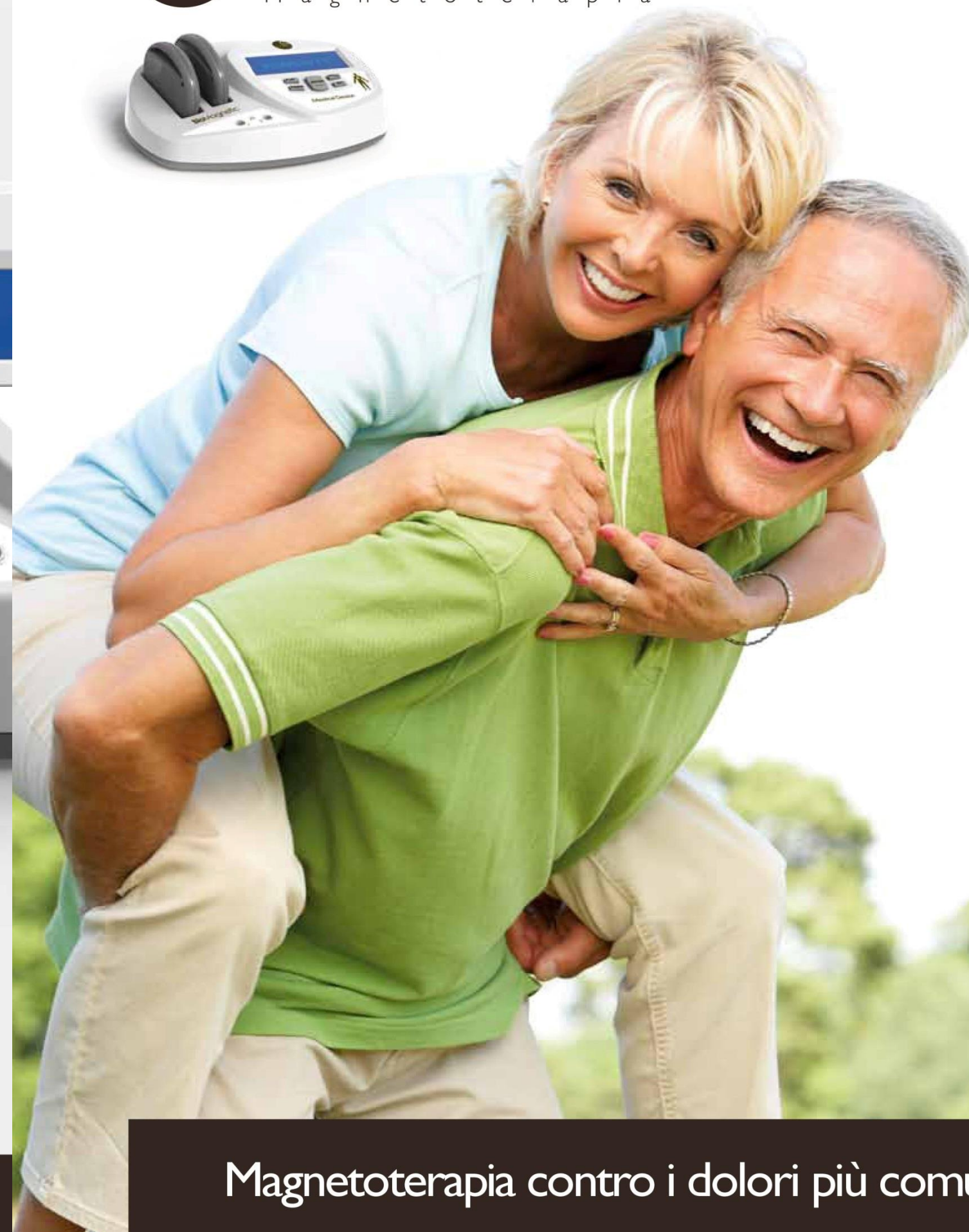

PRODOTTO ITALIANO CERTIFICATO

CE
0051



È un dispositivo medico CE.

L'apparecchio non deve essere utilizzato nei pazienti portatori di pacemaker e nelle donne in gravidanza, nonché in presenza di patologie infettive della parte da trattare. Se i sintomi persistono consultare il medico.

Magnetoterapia contro i dolori più comuni



NUMERO VERDE
800.661803

38121 Trento
Via di Lamar, 2
Tel. 0461.421380
Fax 0461.426768
CF e P.IVA 01969690229
www.hypnos.it
info@hypnos.it